


Body scale

KN-PS800B / KN-PS900B

A

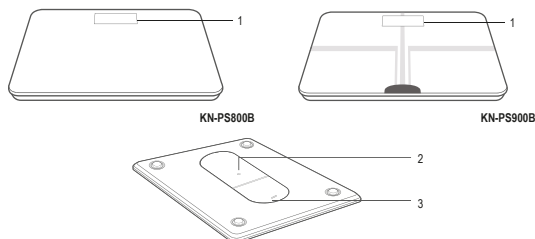

B



Popis

Váha se používá k měření tělesné hmotnosti člověka.

Zařízení (obr. A1)

1. Displej	
2. Tlačítko měrné jednotky	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím tlačítka upravte měrnou jednotku: kilogramy (kg), libry (lb) nebo kameny (st).
3. Prostor pro baterie	<ul style="list-style-type: none"> Otevřete prostor pro baterie. Do prostoru pro baterie vložte 4 baterie AAA. Zavřete prostor pro baterie.

Displej (obr. A2)

4. Indikátor hmotnosti	<ul style="list-style-type: none"> Indikátor zobrazuje hmotnost těla.
5. Indikátor slabé baterie	<ul style="list-style-type: none"> Indikátor se rozsvítí, když jsou baterie slabé.
6. Indikátor dat čekajících na zpracování	<ul style="list-style-type: none"> Indikátor signalizuje, že data čekají na přenos do vašeho mobilního zařízení.
7. Indikátor přenosu dat	<ul style="list-style-type: none"> Indikátor signalizuje, že data jsou přenášena do vašeho mobilního zařízení.
8. Indikátor KG	<ul style="list-style-type: none"> Indikátor se aktivuje, když jsou jako měrná jednotka nastaveny kilogramy (kg).
9. Indikátor LB	<ul style="list-style-type: none"> Indikátor se aktivuje, když jsou jako měrná jednotka nastaveny libry (lb).
10. Indikátor ST	<ul style="list-style-type: none"> Indikátor se aktivuje, když jsou jako měrná jednotka nastaveny kameny (st).
11. Indikátor BIA (pouze KN-PS900B)	<ul style="list-style-type: none"> Indikátor značí, že byla provedena bioelektrická impedanční analýza (BIA).

Instalace

- Stáhněte si a nainstalujte aplikaci „MedM Health“ z obchodu Apple App Store nebo Google Play Store do svého mobilního zařízení.
- Otevřete aplikaci „MedM Health“.
- Zapněte technologii Bluetooth ve svém mobilním zařízení.
- Přejděte do nabídky nastavení a zvolte možnost „Moje zařízení“.
- Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko měrné jednotky po dobu 5 sekund. Váha se spáruje s vaším mobilním zařízením.

Použití

- Zařízení postavte na stabilní, rovný povrch.
- Pro resetování zařízení stiskněte plošinu nohou. Na displeji se zobrazí „0.0“. Zařízení se automaticky zapne. Zařízení je připraveno k použití.
- Postavte se na plošinu. Své nohy umístěte na plochu rovnoměrně a nehybejte se. Na displeji se zobrazí vaše hmotnost.
- Je-li váha spárována s vaším mobilním zařízením, naměřené údaje budou přeneseny do mobilního zařízení.
- Sejděte z plošiny. Zařízení se automaticky vypne.

Bezpečnost

- Před použitím si pozorně přečtěte příručku. Příručku uschovejte pro pozdější použití.
- Zařízení používejte pouze k jeho zamýšlenému účelům. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je popsáno v příručce.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Pokud je zařízení poškozené nebo vadné, okamžitě jej vyměňte.

Pokyny pro použití baterií

- Používejte pouze baterie uvedené v návodu.
- Baterie neinstalujte s obrácenou polaritou.
- Baterie nezkratujte ani nedemontujte.
- Nevystavujte baterie působení vody.
- Nevystavujte baterie působení ohně či nadměrného tepla.
- Při úplném vybití mají baterie tendence vytékat. Abyste zabránili poškození produktu, vyjměte baterie, pokud necháváte produkt na delší dobu bez dozoru.
- Pokud se kapalina z baterie dostane do styku s pokožkou nebo oblečením, okamžitě je opláchněte čistou vodou.

Čištění a údržba

Upozornění!

- Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.
- Necístejte vnitřek zařízení.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat. Pokud zařízení nepracuje správně, vyměňte jej za nové zařízení.
- Venek zařízení očistěte měkkým, suchým hadříkem.