


Body scale

KN-PS800B / KN-PS900B

A

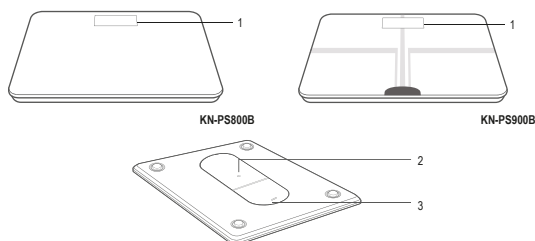

B



Beskrivelse

Personvægten bruges til at måle personers kropsvægt.

Vægt (fig. A)

1. Display	
2. Måleenhed	<ul style="list-style-type: none"> Tryk på knappen for at vælge måleenheden: kilo (kg), pund (lb) eller stone (st).
3. Batterirum	<ul style="list-style-type: none"> Åbn batterirummet. Sæt batterierne (4x AAA) i batterirummet. Luk batterirummet.

Display (fig. A2)

4. Vægtindikator	<ul style="list-style-type: none"> Indikatoren viser kropsvægten.
5. Indikator for lavt batteriniveau	<ul style="list-style-type: none"> Indikatoren tændes, når batteriniveauet er lavt.
6. Ikke overførte data-indikator	<ul style="list-style-type: none"> Indikatoren viser, at nogle data endnu ikke er overført til din mobile enhed.
7. Dataoverførselsindikator	<ul style="list-style-type: none"> Indikatoren viser, at data overføres til din mobile enhed.
8. KG-indikator	<ul style="list-style-type: none"> Indikatoren tænder, når kilogram (kg) vælges som måleenhed.
9. LB-indikator	<ul style="list-style-type: none"> Indikatoren tænder, når pund (lb) vælges som måleenhed.
10. ST-indikator	<ul style="list-style-type: none"> Indikatoren tænder, når stone (st) vælges som måleenhed.
11. BIA-indikator (kun KN-PS900B)	<ul style="list-style-type: none"> Indikatoren viser, at en bioelektrisk impedansanalyse (BIA) er blevet udført.

Montering

- Hent og installer app'en "MedM Health" fra Apple App Store eller Google Play Store på din mobile enhed.
- Åbn app-en "MedM Health".
- Aktiver Bluetooth-funktionen på din mobile enhed.
- Gå til indstillingsmenuen, og vælg "Mine Enheder"
- Tryk og hold måleenhedsknappen inde i 5 sekunder. Personvægten bliver nu parret med din mobile enhed.

Anvendelse

- Placér apparatet på en stabil, flad overflade.
- Apparatet nulstilles ved at trykke på platformen med foden. Skærmen viser "0.0". Apparatet tænder automatisk. Apparatet er klar til brug.
- Træd op på platformen. Stå stille på platformen med fødderne jævnt fordelt. Skærmen viser din vægt.
- Hvis personvægten er parret med din mobile enhed vil datoen for målingen blive overført til din mobile enhed.
- Træd ned fra platformen. Apparatet slukker automatisk.

Sikkerhed

- Læs vejledningen omhyggeligt inden apparatet tages i brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
- Brug kun apparatet til de tilsigtede formål. Brug ikke apparatet til andre formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.
- Brug ikke apparatet, hvis det har beskadigede eller defekte dele. Hvis apparatet er beskadiget eller defekt, skal det omgående udskiftes.

Batterisikkerhed

- Brug kun de batterier, som er nævnt i vejledningen.
- Installer ikke batterierne med omvendt polaritet.
- Kortslut eller afmonter ikke batterierne.
- Udsæt ikke batterierne for vand.
- Udsæt ikke batterierne for ild eller overdreven varme.
- Batterier kan lække, når de er fuldt afladede. For at undgå skade på produktet skal batterierne fjernes, når de produktet efterlades uden opsyn i et længere tidsrum.
- Hvis batterivæsken kommer i kontakt med hud eller tøj skylles omgående med frisk vand.

Rengøring og vedligeholdelse

Advarsel!

- Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
- Gør ikke apparatet rent indvendigt.
- Forsøg aldrig at reparere apparatet. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, skal det udskiftes med et nyt.
- Rengør apparatet udvendigt med en blød, fugtig klud.